


RESPIRA+

MONITOREO • MOTIVACIÓN • MEJOR RESPIRACIÓN



Este dispositivo está diseñado para apoyar ejercicios de rehabilitación pulmonar mediante inspiración sostenida y monitoreo de variables respiratorias en pacientes postoperatorios.


Componentes del sistema

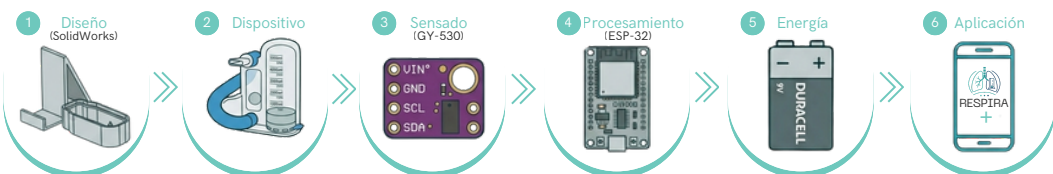

Preparación antes del uso



¿Cómo funcionan los niveles?

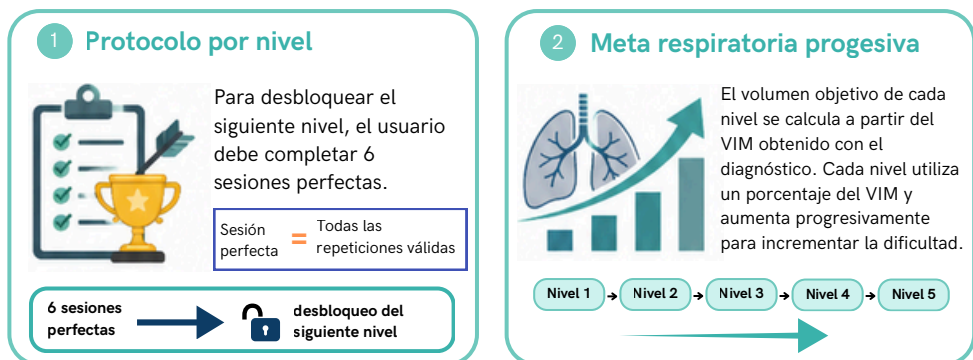



Sigue estos pasos para configurar tu cuenta, conectar el dispositivo y comenzar tu terapia respiratoria con RESPIRA+

1 Ingresa a la aplicación

Abre la aplicación e ingresa con tu clave personal proporcionada por RESPIRA+



Tu clave es única e irreversible.

2 Completa tu perfil

Ingresa tu nombre y edad. Puedes agregar una foto opcional para personalizar tu perfil.



Mantén tu información actualizada.

3 Acepta los términos y condiciones


Lee y acepta los términos para continuar usando la aplicación de forma segura.



Es un requisito para acceder a todas las funciones.

4 Conecta el sensor

En la página de inicio, selecciona "Preparar dispositivo" para conectarlo.

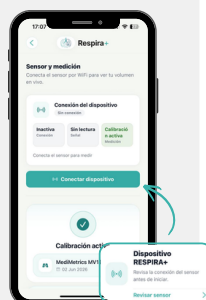

Asegúrate que tu móvil este conectado a la WiFi de la app.

5 Realiza el diagnóstico inicial

Completa el examen diagnóstico para establecer tu nivel base. Este resultado determinará los niveles de terapia personalizados.

EVALUACIÓN INICIAL

Conoce tu punto de partida

Mide tu volumen de referencia para personalizar tus metas de terapia.

Iniciar evaluación

El diagnóstico inicial permite asignar niveles adecuados a tu capacidad respiratoria actual y medir tu progreso de forma precisa.



Sigue las instrucciones en pantalla:

- Inhala profundo y sostenido
- Mantén el globo en el nivel indicado
- La app registrará tu volumen y tiempo dos veces.

Al finalizar, se establecerá tu nivel base para iniciar la terapia.

6 Inicia tus niveles y juega

Accede al menú de niveles y completa sesiones guiadas. Cada nivel tiene objetivos específicos de volumen y tiempo.



7 Mide y comparte tu progreso

Consulta tu historial para ver tu evolución. Aquí encontrarás rachas, progreso, calendario y logros recientes. Exporta los resultados de tus pruebas para compartírtelos a profesionales de la salud.

